

der Hudelist[®] Handschuhmanufaktur

Orthopädische Handschuhe nach Maß



Wir fertigen für Sie außerdem:

- ◇ Kinderhandschuhe
- ◇ Feine Handschuhe
- ◇ Golf-Handschuhe
- ◇ Handschuhe nach Ihren Designvorschlägen
- ◇ Natürlich auch mit Handschuhheizung

Sehr geehrte Damen und Herren!

Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren Handschuhen.

Unser Handschuh-Katalog wurde 2016 neu gestaltet.

Die aktuellen Preislisten (dt & engl), welche Sie auf unserer Homepage finden, sollen Ihnen als Kalkulationsgrundlage dienen. Wir erstellen für jeden Auftrag einen Kostenvoranschlag, bevor Ihre Handschuhe genäht werden. Bei unseren orthopädischen Handschuhen legen wir immer ein kostenpflichtiges Schnittmuster an, sodass bei weiteren Versorgungen auf dieses Muster zurückgegriffen werden kann.

Bei allen Anfragen verwenden Sie bitte unbedingt unser Maßblatt, da wir sonst keine Passformgarantie gewähren können. Weitere Tipps zum Maßnehmen finden Sie auf Seite 12.

Download:

Auf unserer Webseite finden sie alle Informationen zum Download.

Die Lieferzeit beläuft sich auf ca. 4 - 6 Wochen.

Um Ihren Auftrag prompt erledigen zu können, ersuchen wir Sie, uns Ihre Umsatzsteueridentifikationsnummer bekanntzugeben.

Inhaltsverzeichnis

Prothesen-Handschuhe	Seite 4
Orthopädische Handschuhe	Seite 5
Stumpfschutzkappen Hand	Seite 5
Stumpfschutzkappen Oberarm / Unterarm	Seite 7
Quengel- und Therapie-Handschuh	Seite 8
Klettverschluss für Sackhandschuh	Seite 9
Materialauswahl	Seite 10
Handschuhheizung	Seite 11
Farben Nappa Standard	Seite 11
Maßnahmen	Seite 12
Arbeiten aus unserer Werkstatt	Seite 13
Reinigung	Seite 14
Liefer- und Zahlungsbedingungen	Seite 15
Garantie	Seite 15

Prothesen-Handschuhe

- A-1 1 Stück Prothesenhandschuh für **Passivhände**
Ausführung:
Nappaleder, ungefütert mit Aufnaht, Verschlussart nach Wahl.
- A-2 1 Stück Prothesenhandschuh für **Aktivhände**
Ausführung:
Nappaleder, ungefütert mit Aufnaht, Verschlussart nach Wahl.
- A-3 1 Stück Prothesenhandschuh für **Passivhände**
Ausführung: Wildleder, ungefütert mit Aufnaht.
- A-4 1 Stück Prothesenhandschuh für **Aktivhände**
Ausführung: Wildleder, ungefütert mit Aufnaht.
- A-5 1 Stück **Prothesenhandschuh**, ungefütert
1 Stück **Lederhandschuh**, Wollfutter
Ausführung: Nappaleder, mit Aufnaht.
- A-6 1 Stück **Prothesenhandschuh**, ungefütert
1 Stück **Lederhandschuh**, Pelzfutter
Ausführung: Nappaleder, mit Aufnaht.

Verschlussart nach Wahl:

1. Reißverschluss am Daumen innen
2. Reißverschluss in der Hand
3. Drücker

Orthopädische Handschuhe und Stumpfschutzkappen

- B-1 1 Stück **Fäustling**
Wollfutter
Ausführung: Nappaleder, als Schlüpfen
- B-2 1 Stück **Fäustling**
Pelzfutter
Ausführung: Nappaleder, als Schlüpfen
- C 1 Stück **Lederhandschuh**, Standard
Wollfutter
Ausführung: Nappaleder, als Schlüpfen
- D 1 Stück **Lederhandschuh**, Standard
Pelzfutter oder Rehlederfutter
Ausführung: Nappaleder, als Schlüpfen
- C-1 1 Stück **orth. Handschuh** nach Maß
Wollfutter
Ausführung: Nappaleder, als Schlüpfen
- D-1 1 Stück **orth. Handschuh** nach Maß
Pelzfutter oder Rehlederfutter
Ausführung: Nappaleder, als Schlüpfen
-
- C-2 1 Stück **Hand-Stumpfschutz** nach Maß
Wollfutter
Ausführung: Nappaleder, als Schlüpfen
- D-2 1 Stück **Hand-Stumpfschutz** nach Maß
Pelzfutter oder Rehlederfutter



C-3 1 Stück **Hand-Stumpfschutz** nach Maß
Wollfutter
Ausführung: Nappaleder, als Schlüpfer

D-3 1 Stück **Hand-Stumpfschutz** nach Maß
Pelzfutter oder Rehlederfutter
Ausführung: Nappaleder, als Schlüpfer



C-4 1 Stück **Hand-Stumpfschutz** nach Maß
Wollfutter
Ausführung: Nappaleder

D-4 1 Stück **Hand-Stumpfschutz** nach Maß
Pelzfutter oder Rehlederfutter
Ausführung: Nappaleder



C-5 1 Stück **Hand-Stumpfschutz** nach Maß bei schwerer Deformität
Wollfutter
Ausführung: Nappaleder, als Schlüpfer, Verschluss nach Wahl
Diese Position gilt für schwere Handverletzungen und beinhaltet die Anfertigung eines Probehandschuhs. Verrechnung nach Kostenvoranschlag.

D-5 1 Stück **Hand-Stumpfschutz** nach Maß bei schwerer Deformität
Pelzfutter oder Rehlederfutter
Ausführung: Nappaleder, als Schlüpfer, Verschluss nach Wahl
Diese Position gilt für schwere Handverletzungen und beinhaltet die Anfertigung eines Probehandschuhs. Verrechnung nach Kostenvoranschlag.

Obere Extremität: Oberarm / Unterarm

C-6 1 Stück Kälte-Stumpfschutzkappe für Ober- oder Unterarmstumpf

Wollfutter

Ausführung: Nappaleder, Verschluss nach Wahl.



D-6 1 Stück Kälte-Stumpfschutzkappe für Ober- oder Unterarmstumpf


Pelzfutter oder Rehlederfutter

Ausführung: Nappaleder, Verschluss nach Wahl.

C-7 1 Stück Kälte-Stumpfschutzkappe „Krukenberg“

Wollfutter

Ausführung: Nappaleder, Verschluss nach Wahl.

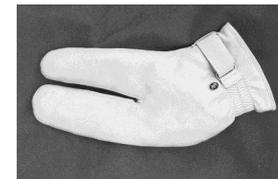

D-7 1 Stück Kälte-Stumpfschutzkappe „Krukenberg“

Pelzfutter oder Rehlederfutter

Ausführung: Nappaleder, Verschluss nach Wahl.

Quengel- und Therapie-Handschuhe

E 1 Stück **Beuge-Quengelhandschuh**

Innenfutter nach Wahl

Ausführung:

Nappaleder, Klettverschluss, fünf Gummizüge in der Innenhand zum Beugen der Finger.

Zur Stabilisierung des Handgrundgelenkes wird in der Innenhand eine Kunststoffverstärkung eingearbeitet.



E-1 1 Stück **Streck-Quengelhandschuh**

Innenfutter nach Wahl

Ausführung:

Nappaleder, Klettverschluss, fünf Gummizüge am Handrücken zum Strecken der Finger.

Zur Stabilisierung des Handgrundgelenkes wird am Handrücken eine Kunststoffverstärkung eingearbeitet.



Sackhandschuh

G-2 1 Stück „Sack-Handschuh“

Innenfutter nach Wahl

Indikation: z.B.: Neurodermitis, ICP, etc.


Ausführung:

Sackförmiger Handschuh ohne Daumen mit seitlichem Reißverschluss und gesperrtem Klettverschluss im Handgelenk. Dieser Klettverschluss kann vom Patienten nicht geöffnet werden. Kunststoffflasche zum Öffnen und Schließen des Handschuhes.



Öffnen: Kunststoffflasche (2) in den Schutzlederkanal (1) einführen und dabei Plüsch und Klett voneinander trennen. Lederverschluss (3) herausziehen. Reißverschluss (4) öffnen.

Schließen: Reißverschluss (4) schließen. Kunststoffflasche (2) in den Schutzlederkanal (1) einführen. Nun schieben Sie den Lederverschluss (3) auf der Kunststoffflasche (2) in den Schutzlederkanal (1) ein.

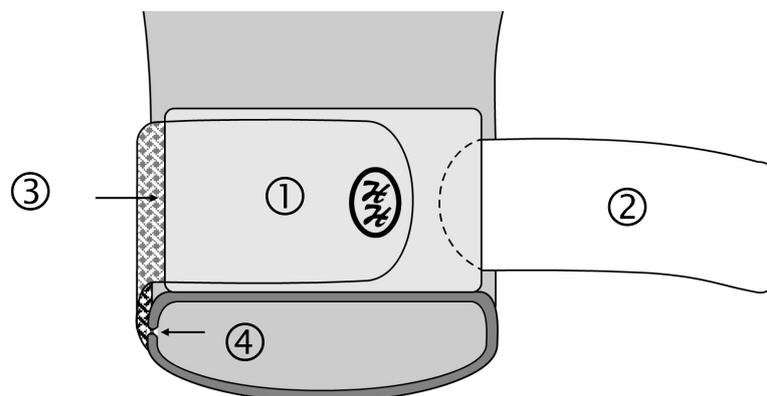

Tipps zur richtigen Materialauswahl

Außenleder:

Nappa standard Ausgehhandschuhe

Nappa robuste Arbeitshandschuhe, auch für Arbeiten im Freien, imprägniert (feuchtigkeitsbeständig)

Hirschleder Arbeitshandschuhe für Arbeiten im Trockenen

Rehleder Ausgehhandschuhe, Prothesenhandschuhe

Innenfutter:

Seidenfutter Ausgehhandschuhe, empfindliche Hände, geringer Kälteschutz

Wollfutter Ausgehhandschuhe, dünne Arbeitshandschuhe

Lammpelz, dünn Ausgehhandschuhe, etwas stärkere Arbeitshandschuhe, Stumpfschutzkappen, guter Kälteschutz

Lammpelz, stark Ausgehhandschuhe, starke Arbeitshandschuhe, sehr guter Kälteschutz

Rehleder Findet postoperativ bei noch sehr schmerzhaften und empfindlichen Handstümpfen seine Anwendung. Das Rehlederinnenfutter ist sehr hautverträglich.

Verschluss:

Schlüpfer Handschuh ohne Verschluss, Standard

Keil und Riegel komfortabler Einstieg, guter Halt

Druckknöpfe Prothesenhandschuhe

Gummizug Fäustlinge, Stumpfschutzkappen im Hand- und Unterarmbereich, Krukenberg, etc.

Klettverschluss Oberhandverschluss, sehr gut geeignet für Arbeitshandschuhe (Schutzhandschuhe für Schlosser, etc.), besteht aus Gummizügen mit Klettverschluss

Reißverschluss Prothesenhandschuhe „Aktiv“, bei besonders komplizierten Handverletzungen mit schwierigem Einstieg in den Handschuh wie zB bei Spastikern, extremer Krallenstellung, Replantaten, Hakendaumen, bei sehr schmerzempfindlichen Händen

Nie mehr kalte Hände – ein komplett neues Gefühl

Auf den ersten Blick ganz normale Handschuhe, doch nicht sichtbare Heizelemente liefern angenehme Wärme. Mit 3 verschiedenen Heizstufen kann die Wärme individuell mit plus/minus Tasten geregelt werden, von angenehmen 36 °C bis zu 55 °C. Austauschbare, extrem leichte und doch sehr leistungsfähige Lithium-Ionen-Akkus wärmen Ihre Hände bis zu 12 Stunden. Mit einem Ladegerät sind die Akkus in 5-6 Stunden wieder aufgeladen.

Lieferumfang:

Handschuhe nach Kostenvoranschlag

Lithium-Ionen-Akku

1 globales Ladegerät

Farbkarte Nappa Standard

schwarz



bordeaux



braun



camel




grau




Extrastarkes und imprägniertes Leder für Arbeitshandschuhe in schwarz und braun lieferbar.


Richtiges Maßnehmen = optimale Passform

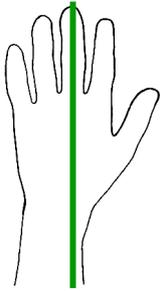

1. wenn möglich bitte beide Hände vermessen
2. Skizze von beiden Händen (zeigt die ursprüngliche Form der verletzten Hand)
3. wenn möglich die Hand immer gerade auflegen, Mittelfinger–Unterarm bilden eine gerade Linie
4. Finger nicht zu weit auffächern

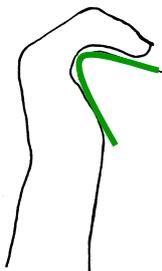

1. Bei starken **Beugekontrakturen**
2. Rolle aus dünnen Karton formen
3. in die Hand schieben
4. darauf die Umrisszeichnung machen
5. Fingerlängen bitte ausmessen

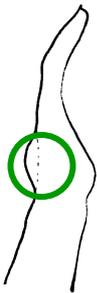

1. Bei einer **Höckerbildung** am Handrücken
2. Hand seitlich aufstellen
3. Zeichnung erstellen
4. Höcker vermessen und einzeichnen
5. bitte ebenso eine Umrisszeichnung bei flach aufgelegter Hand anfertigen

Bei **schweren Deformitäten** bitte Fotos beilegen.

1. Nach Möglichkeit Anfertigung eines Gipsmodells in neutraler Stellung.
2. Umrisszeichnung

TIPP: Passende Handschuhe sind als Vorlagen sehr gut geeignet, bitte mitschicken.

Arbeiten aus unserer Werkstatt



Hinweise zur Reinigung von Handschuhen

Fleckiges Leder

Wischen Sie schmutzige Handschuhe aus glattem Leder mit einem eingeseiften feuchten Tuch ab; nachher trocken wischen.

Vor Sonne schützen

Damit Ihre Lederhandschuhe nicht fleckig werden, dürfen Sie diese nie längere Zeit in der Sonne liegen lassen.

Haarshampoo für Lederhandschuhe

Schmutzige helle ungefütterte Lederhandschuhe zieht man an und wäscht sie in lauwarmem Seifenwasser so, als würde man sich die Hände waschen. Anschließend abspülen und zum Rückfetten einen Schuss Glycerin ins letzte Wasser. Ziehen Sie die Handschuhe aus, blasen Sie Luft in die Finger und hängen Sie sie zum Trocknen auf.

Nasses Leder aufhängen

Wenn Ihre Handschuhe einmal nass geworden sind, sollten Sie diese aufhängen und trocknen lassen (nicht beim Ofen oder vor der Heizung). Veloursleder anschließend gut aufbürsten. Ist das Leder durch die Nässe hart geworden, kneten Sie es weich.

Lanolin für Glattleder

Glatte Lederhandschuhe bleiben geschmeidig und bekommen keine Risse, wenn man sie mit Lanolin oder Rizinusöl einreibt und dieses eine Weile einwirken lässt. Mit einem weichen Tuch nachpolieren.

Keine Chemie bei Wildleder

Chemische Fleckenentferner sind bei Wildleder nicht zu empfehlen. Es könnten sich hässliche Ränder um die Flecken bilden und die Farbe verlaufen. Entfernen Sie fettige Stellen am besten mit einem Wildleder-Reinigungstuch.

Speckige Stellen

Speckige Stellen am Rauleder können Sie mit einer feinen Draht- oder Kreppbürste wieder aufrauen.

Wir empfehlen unsere Bio-Lederpflege zur Pflege von glattem Leder. (Handschuhe, Schuhe, Taschen, ...)

Liefer- und Zahlungsbedingungen

- ◇ Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung uneingeschränktes Eigentum der Firma Hudelist GmbH.
- ◇ Porto und Verpackung fallen zu Lasten des Empfängers
- ◇ Zahlbar prompt nach Erhalt der Ware.
- ◇ Mehrpreis für Ausführung in imprägniertem Nappaleder: (wasserabstoßend und speziell für Arbeitshandschuhe): 10 %
- ◇ Mehrpreis für Ausführung mit doppeltem Innenbesatz, gelascht, (speziell für Arbeitshandschuhe): 10 %
- ◇ Mehrpreis für Ausführung in Wildleder: 15 %
- ◇ Mehrpreis für Seidenfutter: 10 %
- ◇ Mehrpreis für Spange, Golfverschluss, Riegelverschluss, Reißverschluss, Keil, Klettverschluss, falls in der Ausführung nicht vorgesehen, wird laut aktueller Preisliste verrechnet
- ◇ Modelle, Zeichnungen und Schnittmuster werden für weitere Versorgungen archiviert

Garantie

Wir garantieren,

- ◇ dass die Leder der Deutschen PCP-Vorschrift vom 12. 12. 1998 entsprechen (max. 5ppm-mg/kg).
- ◇ dass die Leder keine verbotenen AZO-Farbstoffe gemäß Bedarfsgegenständeverordnung enthalten.
- ◇ dass die Leder keine allergisierenden Dispersionsstoffe enthalten.
- ◇ dass die Leder kein Chrom VI und freies Chrom III über der gesetzlich erlaubten Konzentration enthalten.

der Hudelist[®] Handschuhmanufaktur



ausgezeichnet mit dem Stadtwappen der Stadt Klagenfurt

Ihre Ansprechpartner:

Frau Manuela Petzl

Mo - Mi 8.00 - 14:30

Do + Fr 8.00 - 13:30

Hudelist GmbH
Völkermarkter Straße 75
A-9020 Klagenfurt am Wörthersee

Tel 0043 (0)463 38 11 00 27
Fax 0043 (0)463 38 11 00 11
E-Mail handschuh@hudelist.at
Web www.hudelist.at